

NOUVEAU

NOCOSPRAY KUBE

L'appareil compact de bio-désinfection des surfaces par voie aërienne à la technologie avancée.



99,9%
biodégradable



Sans résidu,
non corrodant



Pas de résistance
de germes

Le contrôle à portée de main

La technologie du Nocospray Kube assure optimisation, sécurité et traçabilité.

Pour faciliter et personnaliser les protocoles, il est possible de paramétrer, via l'écran tactile, différents profils utilisateurs aux droits d'accès variables, des zones (départements, bâtiments...) et des espaces spécifiques. La pré-configuration du volume à traiter, de la dose, du temps de contact et du nombre de répétitions est propre à chaque espace.

L'appareil dispose de fonctionnalités pour un traitement en toute sécurité : départ différé, système de connexion rapide, verrouillage automatique de la bouteille... Les rapports de traçabilité générés par l'appareil sont collectés grâce au port usb.



Un appareil compact et autonome dédié aux petits espaces

Le Nocospray Kube répond au besoin des professionnels de traiter des espaces réduits tels que les postes de Sécurité Microbiologiques (PSM), passe-plat, sas de transferts, isolateurs, réfrigérateurs, etc. Il assure un traitement des volumes jusqu'à 10m³. L'appareil est léger (3,1 kg) et fonctionne sur batterie rechargeable afin d'éviter le passage de câbles, en particulier dans des zones étanches.

Une technologie de diffusion optimale

Les vibrations ultra rapide produites par la membrane assurent une parfaite diffusion du produit de biodésinfection. Les particules émises sont ionisées et le peroxyde est dégradé. Le brouillard sec ainsi généré assure une sédimentation lente et uniforme sur chaque cm² du volume traité, sans générer d'humidité sur les surfaces. Grâce à la dégradation naturelle rapide de la solution Nocolyse et Nocolyse+, il n'existe aucun risque de corrosion des surfaces, même électroniques.

L'efficacité du Nocolyse dans un format mini

Le Nocolyse 250mL est formulé à base de peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) exempts d'acide peracétique.



Utilisez les produits biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Un processus de bio-désinfection automatisé



1. Installation

Mise en place du système Nocospray Kube dans la l'espace à traiter.




2. Diffusion

Diffusion du produit sous forme de brouillard de façon homogène sur toutes les surfaces accessibles.



3. Temps de contact

Le brouillard reste en suspension et élimine tous les micro-organismes (virus, bactéries, spores, levures...) présents sur les surfaces accessibles.

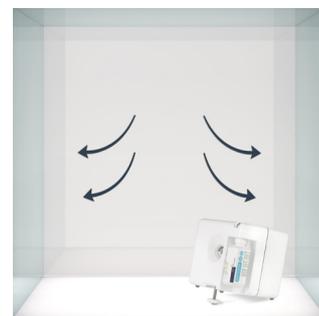

4. Bio-dégradation

Le brouillard se dégrade naturellement sans laisser de résidu et sans corroder les surfaces. Nul besoin d'essuyer et d'aérer.